

Catalogue 2017

Machines professionnels de santé

Adéquation s'occupe de votre bien-être et de votre budget.

Notre société vous assure les meilleurs prix du marché car notre approvisionnement est direct (absolument sans aucun intermédiaire) chez les fabricants partout dans le monde. Nous mettons en permanence à jour nos catalogues avec des nouvelles machines, de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre d'être toujours à la pointe, conquérir de nouveaux patients et/ou accroître votre CA.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une recherche précise car, même si la machine n'apparaît pas dans nos catalogues, nous pourrions la trouver pour vous.

Comparez nos prix avec la concurrence et vous reviendrez chez nous. Toutes nos machines sont vendues avec 1 an de garantie pièces et main d'œuvre.

Toutes nos machines possèdent l'agrément de conformité CE.

Listing machines pour les professionnels de santé:

- Dépil'Lasers (dépigmentation définitive)
- CO2 Fractionnel Laser
- Détatouage (pigmentation de la peau, tatouages)
- Cryo Slim (Cryolipolyse minceur)
- LED clinique
- LED Haute Densité


Dépil'Lasér

La technique de dépilation par laser est la plus performante des techniques disponibles dans ce domaine.

Cette machine est équipée d'un pommeau avec diode laser à 808nm (infrarouge). Le **système de diode laser génère des impulsions** dans le domaine infrarouge dont vous pourrez définir les caractéristiques (impulsion jusqu'à 950ms) pour assurer la dépilation la mieux adaptée à la peau de votre patient(e). Le follicule est détruit par l'impulsion laser et empêche ainsi la repousse du poil. La zone de contact avec la peau est refroidie afin de minimiser tout désagrément dû au traitement.

La **technologie diode laser 808nm démontre également ses capacités sur les peaux sombres** (contrairement à la technologie de lumière pulsée).

Par ailleurs, cette machine permet également le **traitement des varices**.

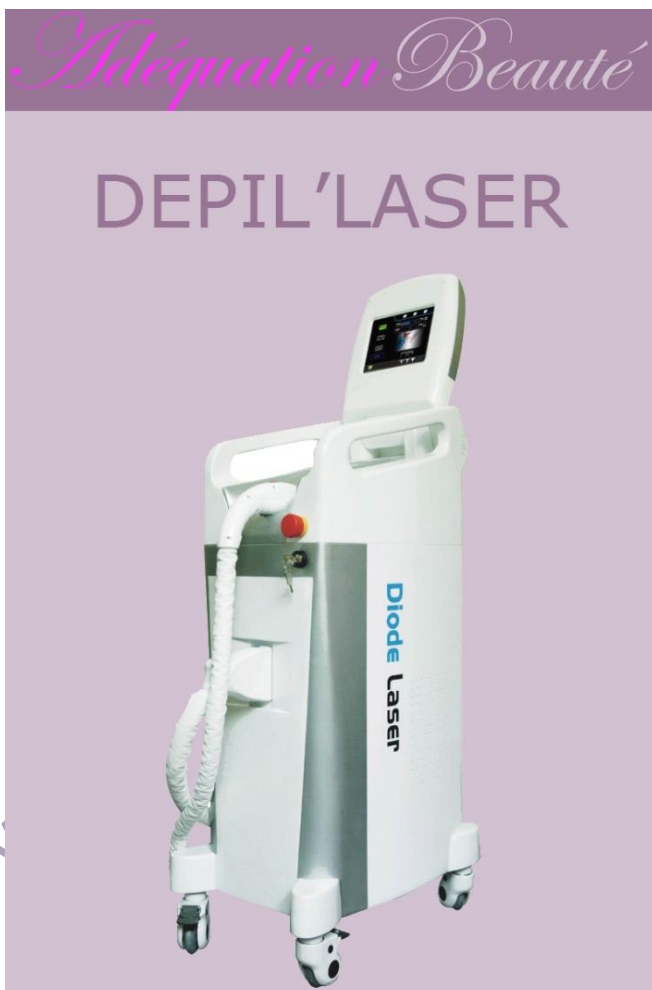

| DEPIL'LASER Adéquation | |
|-------------------------------|---|
| Type | diode laser 808nm |
| Affichage | Ecran tactile 21cm |
| Puissance | 1000W |
| Impulsion | 0-950 ms réglable |
| Fluence | 1 à 120 J/cm ² (réglable) |
| Fréquence | 1-20HZ |
| Spot traitement | 15*10 mm ² |
| Durée de vie | 10000*1000shots |
| Température | -5~0°C |
| Taille | 45*48*90cm |
| Poids | 45kg |
| Alim électrique | AC 220V±10%, 6A, 50HZ |
| Tarif : 16990€ HT | |

CO2 fractionnel

Cette technique démontre son efficacité pour éliminer les rides, les ridules, cicatrices, rides d'expression. Cette technique est également efficace pour resserrer les pores et la pigmentation de la peau telle que le chloasma, les taches de rousseur et les traces dues au vieillissement. Enfin elle permet de traiter l'acné et les verrues.

Cette machine utilise le procédé d'irradiation laser par balayage (suivant une matrice de points) qui forme une zone délimitée et soumise à une réaction. Cette zone est composée d'une matrice de points d'action du laser qui forment un réseau sur l'épiderme. Chaque point d'action laser est constitué par une seule ou plusieurs impulsions laser à haute énergie. L'action du laser atteint directement la couche du derme et produit des micro-ouvertures coniques à la surface de la peau. Le laser permet de stimuler la prolifération et la restructuration du collagène dans l'épiderme. La contraction de l'ouverture en forme de cône à la surface de la peau améliore évidemment l'aspect voluptueux de la peau. La peau devient plus lisse, élastique et montre une nette amélioration qualitative.

Avantages :

Le format maximum de la matrice de points peut atteindre **30mm**.

Le laser fractionnel régule la profondeur de pénétration, la taille de la matrice, la largeur de l'impulsion et l'énergie du laser avec un positionnement précis et fiable.

C'est un dispositif laser à impulsions haute puissance, haute énergie.

Il offre une durée de traitement et de cicatrisation raccourcie.

Adéquation Beauté

Adéquation Beauté

CO2 Fractionnel



| CO2 fractionnel | |
|-------------------------------|--|
| Longueur d'onde laser | 10600nm |
| Laser | TM00 module CO2 |
| Fonctions laser | Continue, Simple flash, Flashes répétés, Super Flash |
| Pommeau | Largeur maximale de la matrice 30mm |
| Forme de la sortie | Carré, Rectangulaire, Rond, Ovale |
| Flash mini | 0.1ms |
| Dimensions | 64*68*150cm, 84*23*14 |
| Poids | 70kg |
| Tarif : Nous Consulter | |

www.adequationbeaute.com

Adéquation Beauté

Détatouage Adéquation

Cette machine permet de retirer les tatouages, les taches, les différentes pigmentations (colorations) de peau.

Tout d'abord, le laser est absorbé par la mélanine (ou l'encre s'il s'agit d'un tatouage). Ensuite, l'énergie du laser provoque une expansion rapide du pigment qui se fragmente en minuscules particules. Enfin, les particules sont évacuées par les phagocytes en dehors du corps. La dépigmentation se fait progressivement au fur et à mesure des soins.



| DETATOUAGE Adéquation | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Laser | Q-switched ND YAG laser solid |
| Longueur d'onde | 1064nm, 532nm |
| Affichage | Ecran tactile |
| Energie | 0-1300mJ |
| Durée flash | 6ns |
| Taux de flash | 1-6Hz |
| Diamètre du spot | 1-6mm |
| Dimensions: | 41*25*23cm |
| Poids: | 10kg |
| Tarif : 5990€ HT | |


Adéquation Beauté

Cryo'Slim

La technologie de refroidissement+laser permet aux basses températures de figer puis fractionner le tissu adipeux sous-cutané à une température de -6°C à -10°C . Les cellules grasses diminueront progressivement au fil du temps, puis seront éliminées du corps par les lymphocytes lors du drainage lymphatique qui suit la séance.

Nous distribuons plusieurs types de machines Cryo'Slim de 1 à 4 pommeaux.

Une membrane est appliquée sur la peau pour éviter toute brûlure due au froid.

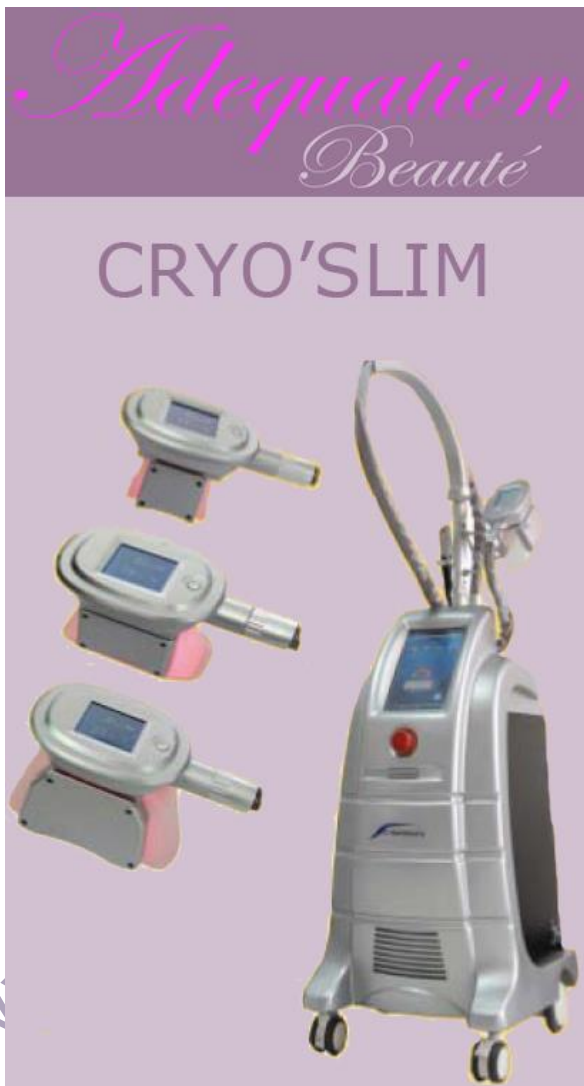

| Cryo'Slim Adéquation | |
|-------------------------------|---|
| Puissance | 1000W |
| Pression de succion | 0~-1MPa |
| Système de refroidissement | Eau + Ventilation + Gel |
| Température de traitement | $\leq 0^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ |
| Dimensions | 45*40*118cm |
| Poids | 45kg |
| Température | $10^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$ |
| Tension alimentation | 220V |
| Tarif : Nous Consulter | |

Adéquation Beauté

LED Clinique (5 couleurs dont infrarouge)

Les traitements par LED représentent une technologie sécuritaire et efficace, à la pointe du développement scientifique et thérapeutique. En plus d'être totalement indolore, un des grands avantages réside dans sa parfaite innocuité. Les LED fournissent suffisamment d'énergie pour stimuler une réponse cellulaire du corps afin de provoquer une nette amélioration de la qualité de peau.

Thérapie infrarouge: Action intense grâce à la puissance importante dégagée par les LED pour cette longueur d'onde.

Lumière bleu: Amélioration de l'acné, diminution des inflammations et comédons améliorés. Cette longueur d'onde est recommandée après les traitements au laser ou au détatouage.

Lumière rouge: Réduction des ridules et rides, amélioration de la texture de la peau. Restructuration de la peau grâce à la génération de collagène, micro-circulation sanguine épidermique améliorée.

Lumière jaune: Aide le système lymphatique à détoxifier votre corps.

Lumière verte: Réduit la pigmentation grâce à la pénétration dans les couches de la peau de base. Préviend la formation de tâches et pigmentations liées au vieillissement pour garder la peau lisse et éclatante.



| |
|---|
| LED Clinique Adéquation (2500 leds) |
| Tarif : Nous consulter |

Adéquation Beauté


LED Haute Densité (Couleur rouge & bleu)

Pour les professionnels qui veulent développer des soins spécialisés de très haute qualité et qui sont prêts à investir dans une machine très haut de gamme, voici notre machine LED Haute Densité.

Lumière bleue: Amélioration de l'acné, diminution des inflammations et comédons améliorés. Cette longueur d'onde est recommandée après les traitements au laser ou au détatouage.

Lumière rouge: Réduction des ridules et rides, amélioration de la texture de la peau. Restructuration de la peau grâce à la génération de collagène, micro-circulation sanguine épidermique améliorée.

Adequation Beaute

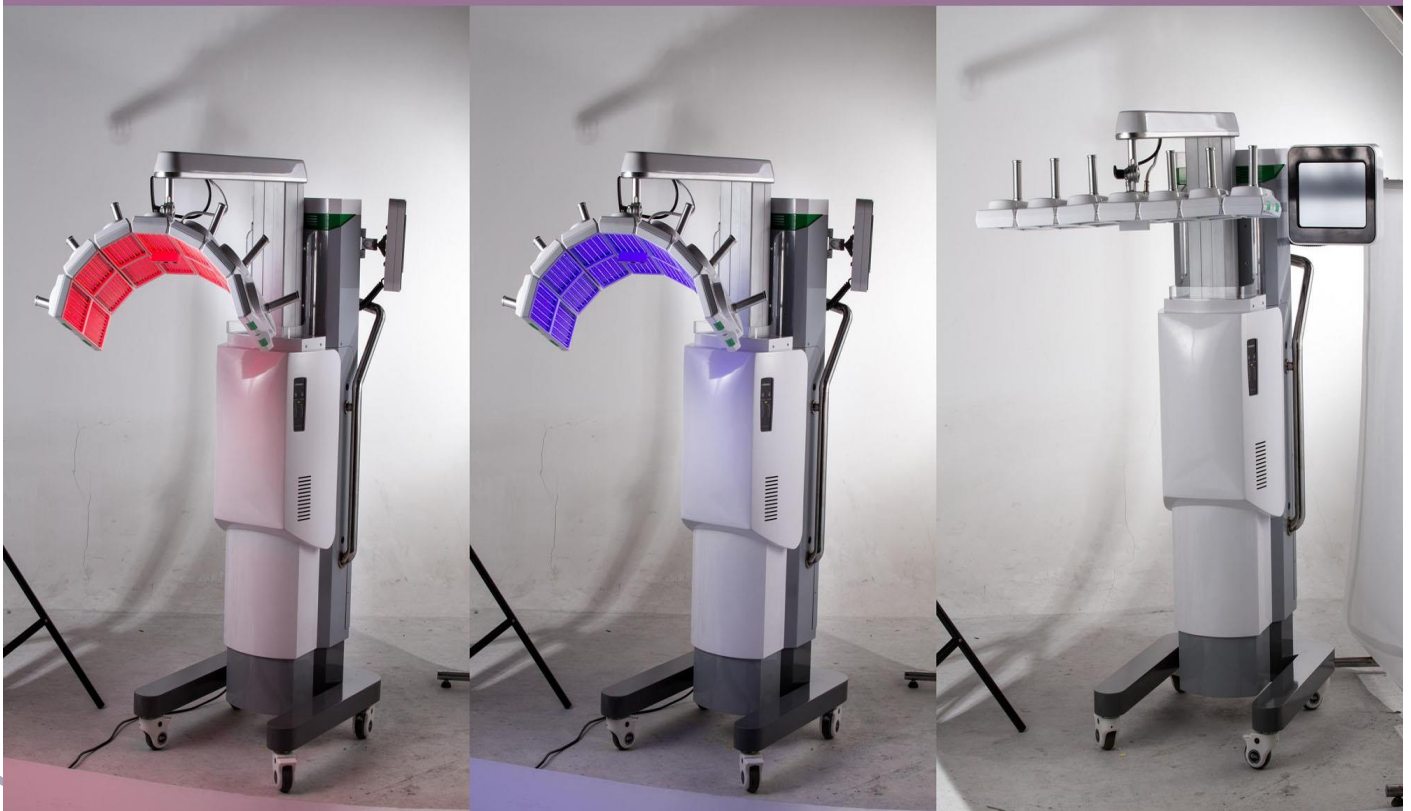

Adéquation Beauté

| LED Haute Densité | |
|----------------------------------|---|
| Intensité lumineuse (par LED) | Lumière rouge > 8000mcd Lumière bleu > 4000mcd |
| Puissance électrique | 350W |
| Nombre de LEDS | 1680 LEDs rouge (640nm) 1680 LEDs bleu (415nm) |
| Dimensions | 107*56*1960cm |
| Poids | 70kg |
| Tension alimentation | 220V |
| Tarif : Nous consulter | |